

Safeflow



Valve bidirectionnelle en système clos

Pour l'assurance d'une perfusion en toute sécurité

Un accès intraveineux en système clos et sans aiguille, offrant sécurité et innovation.

Safeflow, la sécurité de la perfusion au quotidien !

Safeflow est un système de perfusion sans aiguille qui permet l'injection, le prélèvement et la perfusion tout en assurant la sécurité du personnel soignant.

Le site d'injection, facilement désinfectable, la valve en élastomère, se refermant automatiquement après déconnexion, dispensent de l'utilisation de bouchons obturateurs.

Ce système clos permet d'éviter les risques de fuite et d'embolie gazeuse et ainsi d'assurer la sécurité des patients.




Safeflow, une technologie innovante !

Safeflow est compatible avec tous les dispositifs médicaux équipés d'un embout Luer ou Luer-Lock.


Une conception innovante lui permet d'atteindre un débit de 360 ml/min.

Mécanisme d'action

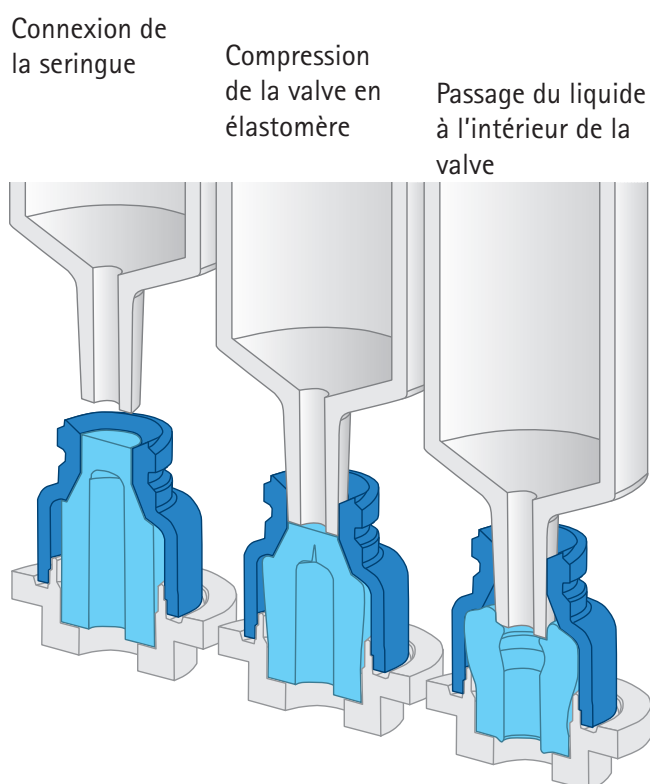

Safeflow, la sécurité de la perfusion au quotidien !

Existe aussi avec un prolongateur en Y ce qui permet de manipuler à distance du site de ponction.

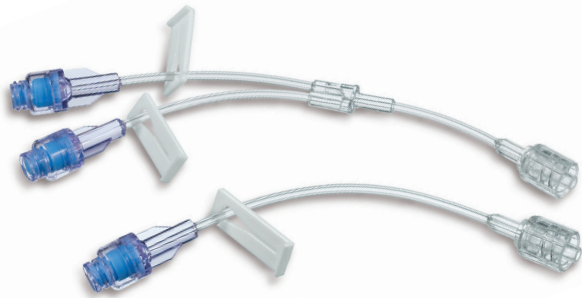

Bénéfices utilisateurs

- Prévention contre les AES
- Réduction des risques de contamination
- Désinfection aisée
- Débit optimisé
- Connexion stable



Luer



Luer-Lock

Caractéristiques du Safeflow

Débit	360 ml/min
Sans Latex	✓
Compatibilité Luer et Luer-Lock	✓
Volume d'amorçage	0,09 ml
Nombre de connexions possibles	plus de 200
Durée d'utilisation	24 heures ou selon le protocole de l'hôpital
Pression	valve à pression négative
Prolongateur	Polyuréthane
Embout du prolongateur	Luer-Lock mobile

Description	Sans Latex	Sans DEHP	Sans PVC	Diamètre interne	Longueur du prolongateur	Conditionnement en unités par boîte	Référence
Valve Safeflow	•	•	•			50	409100H
Prolongateur + 1 Safeflow	•	•	•	1 mm	10 cm	50	4097154
Prolongateur en Y + 2 Safeflow	•	•	•	1 mm	12 cm	50	4097145

Distribué par :

B. Braun Medical SAS | Direction Hôpital | 204, avenue du Maréchal Juin | 92660 Boulogne Billancourt Cedex – France

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr

B. Braun Medical SAS au capital de 31 000 000 € | RCS NANTERRE 562 050 856

Fabriqué par :

B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun-Str. 1 | 34212 Melsungen | Allemagne



Imprimé sur un papier issu d'une forêt éco-gérée



Le contenu de ce document, notamment les données, les informations, les marques et les logos sont la propriété exclusive de B. Braun Medical SAS et sont protégés par copyright©2010, B. BRAUN, tous droits réservés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale est interdite et constitue une infraction aux copyrights de B. Braun et autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation des produits commercialisés par B. Braun Medical SAS doit se faire exclusivement en conformité avec les instructions d'utilisation.