

# Aesculap<sup>®</sup> modular suction cannulas

... the economical and flexible suction cannulas.



Aesculap Neurosurgery

# Aesculap® modular suction devices



## Greater cost efficiency and flexibility...


- Damaged suction tubes can be replaced individually
- Tray weight is reduced and less space is required
- Greater freedom for even more flexible use

## Erhöhte Wirtschaftlichkeit und Flexibilität...

- Beschädigte Saugrohre können separat ausgetauscht werden
- Reduziertes Siebgewicht und weniger Platzbedarf
- Zusätzlicher Freiheitsgrad für noch flexibleren Einsatz

## 36 different suction tubes ...

36 verschiedene Saugrohre ...

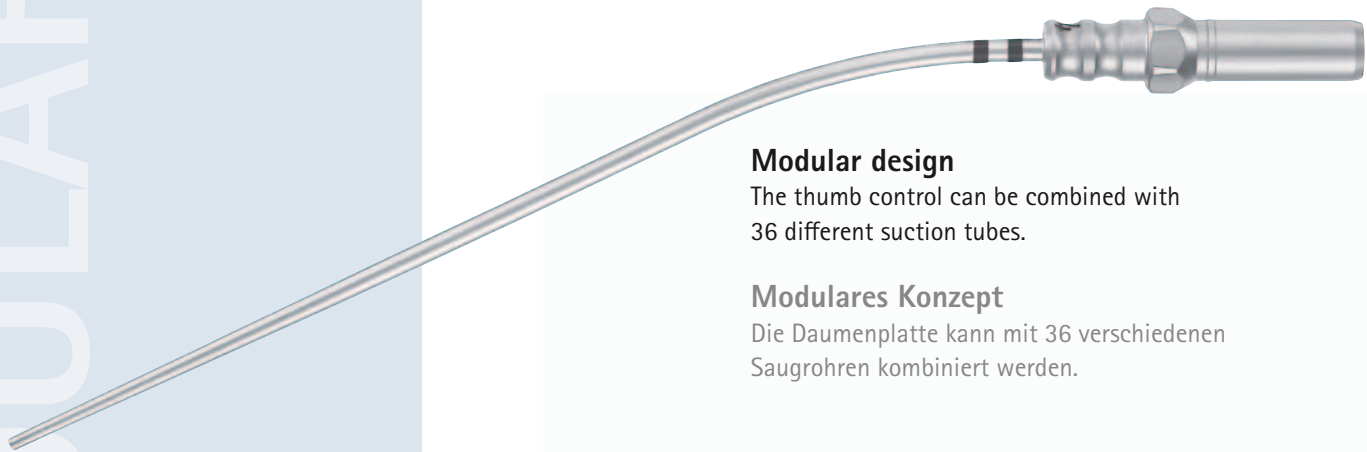


### Modular design

The thumb control can be combined with 36 different suction tubes.

### Modulares Konzept


Die Daumenplatte kann mit 36 verschiedenen Saugrohren kombiniert werden.

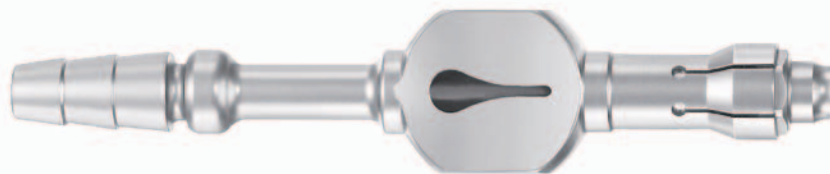

MODULAR



... 1 thumb control  
... 1 Daumenplatte

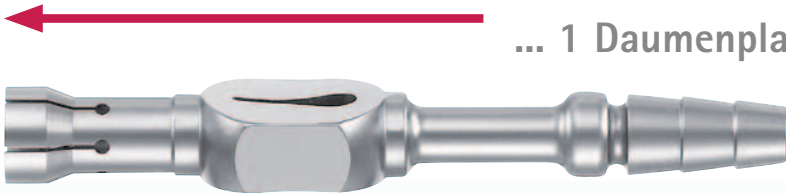


**Adaption**

Adaptation is quick and easy.

**Adaption**

Einfache und schnelle Adaption.

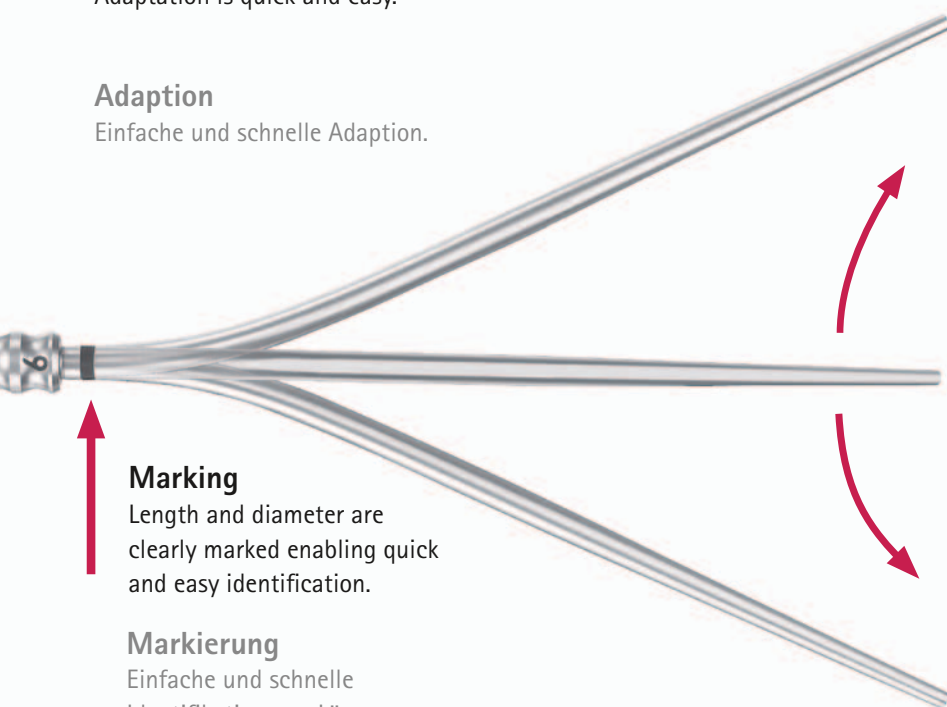

**Marking**


Length and diameter are clearly marked enabling quick and easy identification.

**Markierung**

Einfache und schnelle Identifikation von Länge und Durchmesser.

**Suction tube can be connected in six positions**  
Greater freedom allowing even greater flexibility.

**Saugrohr in sechs Positionen konnektierbar**  
Zusätzlicher Freiheitgrad für noch mehr Flexibilität.

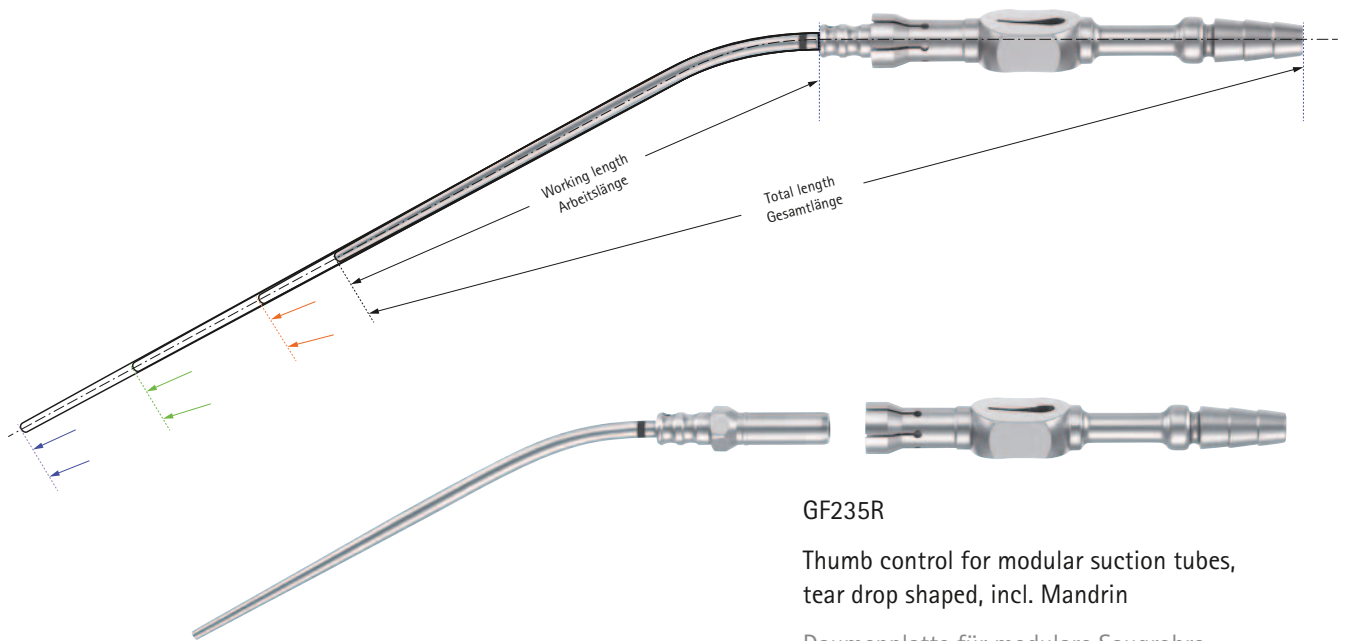

**GF235R**

Thumb control for modular suction tubes, tear drop shaped, incl. Mandrin

Daumenplatte für modulare Saugrohre, Tropfenform, inkl. Mandrin

	<b>○S</b>	<b>○○M</b>	<b>○○○L</b>	<b>○○○○LL</b>
Working length Arbeitslänge	100 mm	115 mm	140 mm	165 mm
Total length Gesamtlänge	185 mm	200 mm	225 mm	250 mm

Outer diameter / Außendurchmesser	3 Fr.	○	GF240R	GF250R	GF260R	GF270R
	4 Fr.	○	GF241R	GF251R	GF261R	GF271R
	5 Fr.	○	GF242R	GF252R	GF262R	GF272R
	6 Fr.	○	GF243R	GF253R	GF263R	GF273R
	7 Fr.	○	GF244R	GF254R	GF264R	GF274R
	8 Fr.	○	GF245R	GF255R	GF265R	GF275R
	9 Fr.	○	GF246R	GF256R	GF266R	GF276R
	10 Fr.	○	GF247R	GF257R	GF267R	GF277R
	12 Fr.	○	GF248R	GF258R	GF268R	GF278R

3 Fr. = 1 mm

### ... coupled with familiar strengths!

- Tear drop shaped thumb control for a very precise suction regulation
- Malleable material for individual forming of the suction tube
- Conical design of the tube reduces plugging

### ... gepaart mit den bekannten Stärken!

- Tropfenförmiger Saugunterbrecher für eine sehr feine Regulation der Saugleistung
- Biegsames Material für individuelle Ausformung des Saugrohres
- Konisches Design des Saugrohres vermindert Verstopfung



Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany  
Phone +49 (0) 74 61 95-0 | Fax -49 (0) 74 61) 95-26 00 | [www.aesculap.com](http://www.aesculap.com)

Aesculap – a B. Braun company

The main product trademark 'Aesculap' is a registered trademark of Aesculap AG.

Subject to technical changes. All rights reserved. This brochure may only be used for the exclusive purpose of obtaining information about our products. Reproduction in any form partial or otherwise is not permitted.

Broschure No. C90011

0113/1.0/1