



Perfusor® compact<sup>plus</sup>

**B | BRAUN**

PRESCRIPTION

PATIENT ACCESS

PREPARATION

APPLICATION

DISCHARGE  
MANAGEMENT

compact<sup>plus</sup>  
TIME TO CARE

# Infusomat<sup>®</sup> en Perfusor<sup>®</sup> compact<sup>plus</sup>

Tijd voor zorg



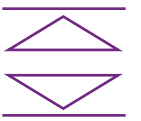
KLEUREN-  
SCHERM



VISUELE INSTRUCTIES  
BIJ AANKOPPELEN




INTUÏTIEF  
GEBRUIK



B. BRAUN  
DOSEGUAARD™

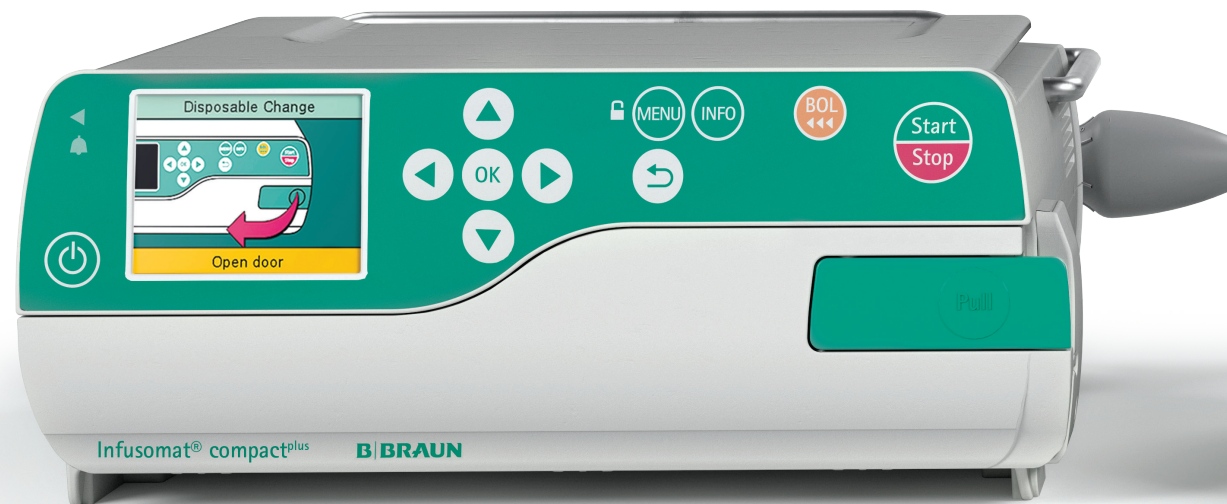GEBRUIKERSGEMAK EN VEILIGHEID



PRESTATIES



MINIMALE  
TRAINING



SNEL  
OPSTARTEN



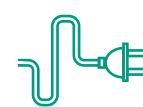
HOGHE  
NAUWKEURIGHEID



INNOVATIEVE  
IT-INTEGRATIE



TECHNISCHE SPECIFICATIES



GEÏNTEGREERDE  
NETVOEDING



ROBUUST  
DESIGN



IP34-WATER  
BESCHERMING



LI-ION  
BATTERIJ



# Perfusor® compact<sup>plus</sup>

Meer tijd voor zorg



### Flexibiliteit

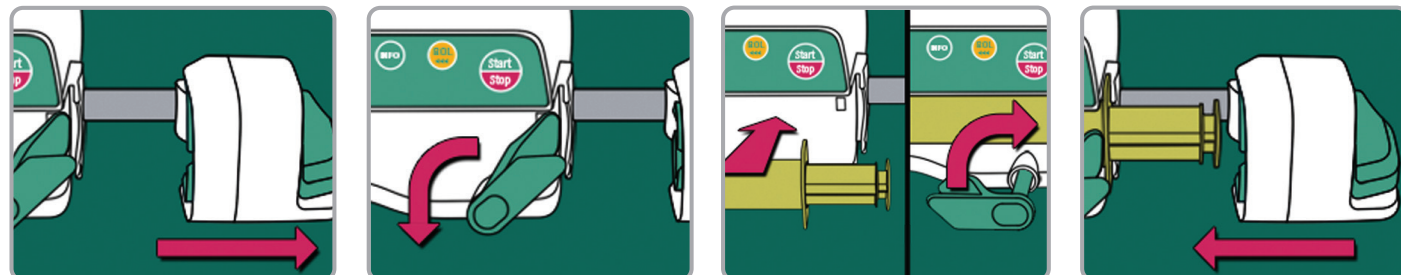
Geavanceerd modulair systeem geschikt voor transport.

### Grafische gebruikersinterface

Intuïtieve bediening en begeleid aankoppelen van de disposable: minder training nodig.

### Spuit installeren

Snel plaatsen van de spuit en veilig opstarten van de therapie dankzij de semi-automatische aandrijving.



KLEUREN-DISPLAY



VISUELE INSTRUCTIES BIJ AANKOPPELEN




INTUÏTIEF GEBRUIK



# Infusomat<sup>®</sup> compact<sup>plus</sup>

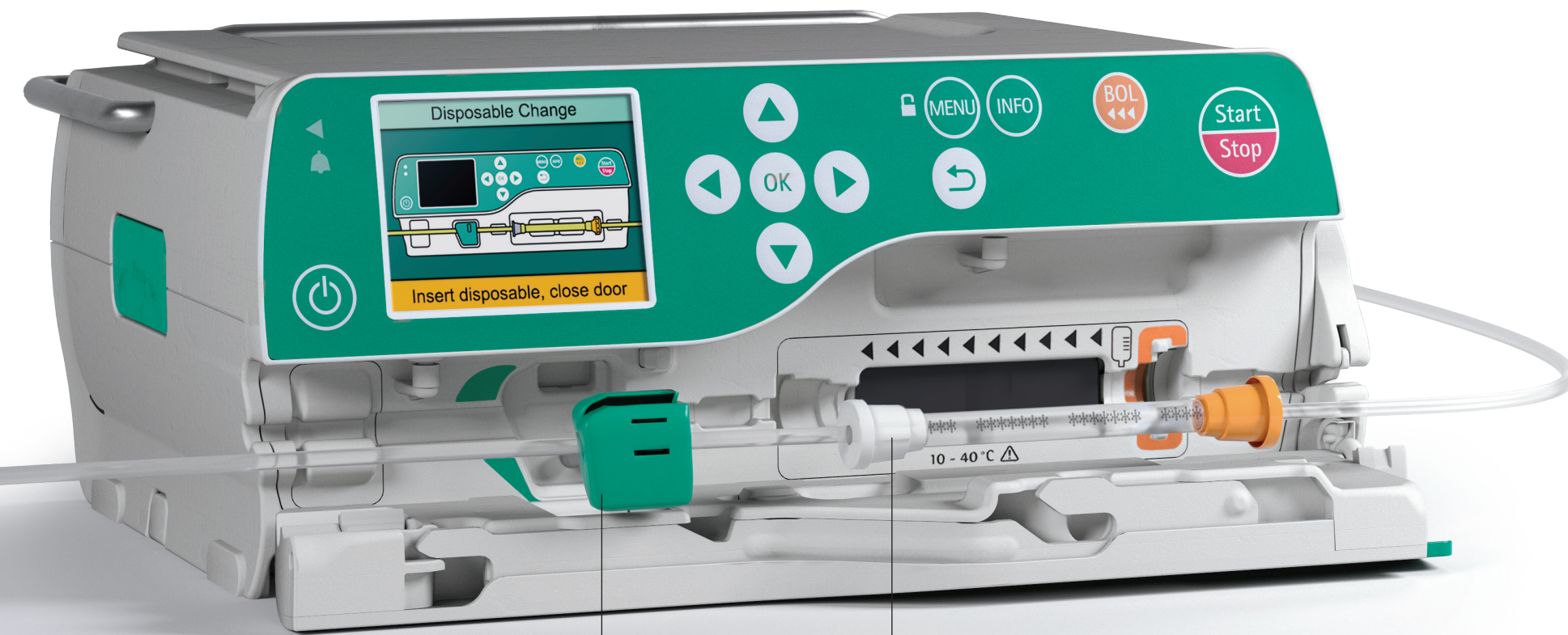Meer tijd voor zorg



### Anti free-flow klem

De anti free-flow klem sluit automatisch de lijn om te voorkomen dat er free-flow ontstaat als het front geopend wordt.

### Infusomat<sup>plus</sup> lijn

Kleurcodering en vormen maken het eenvoudig om een infuuslijn te plaatsen. De lijnen zijn gemaakt van speciaal materiaal om nauwkeurigheid te garanderen over een lange periode (96 uur).

AIR STOP



### AirStop

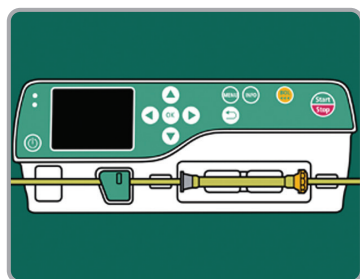
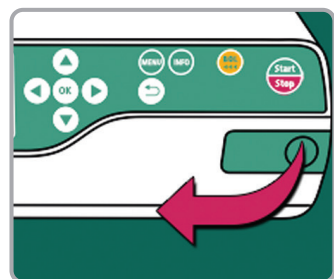
Het hydrofiel luchtdicht membraam zorgt ervoor dat de pomp automatisch stopt wanneer de druppelkamer leeg is. Dit voorkomt het doorschieten van de lijn met lucht.

PRIME STOP



### PrimeStop

De beschermende afsluitdop met een hydrofoob membraan voorkomt lekkage bij het primen van de lijn.



INFUSOMAT<sup>PLUS</sup>  
SAFESET



VOEDINGS-  
THERAPIE



KLEUREN-  
DISPLAY



VISUELE INSTRUCTIES  
BIJ AANKOPPELEN




INTUÏTIEF  
GEBRUIK



# Geavanceerde workflow

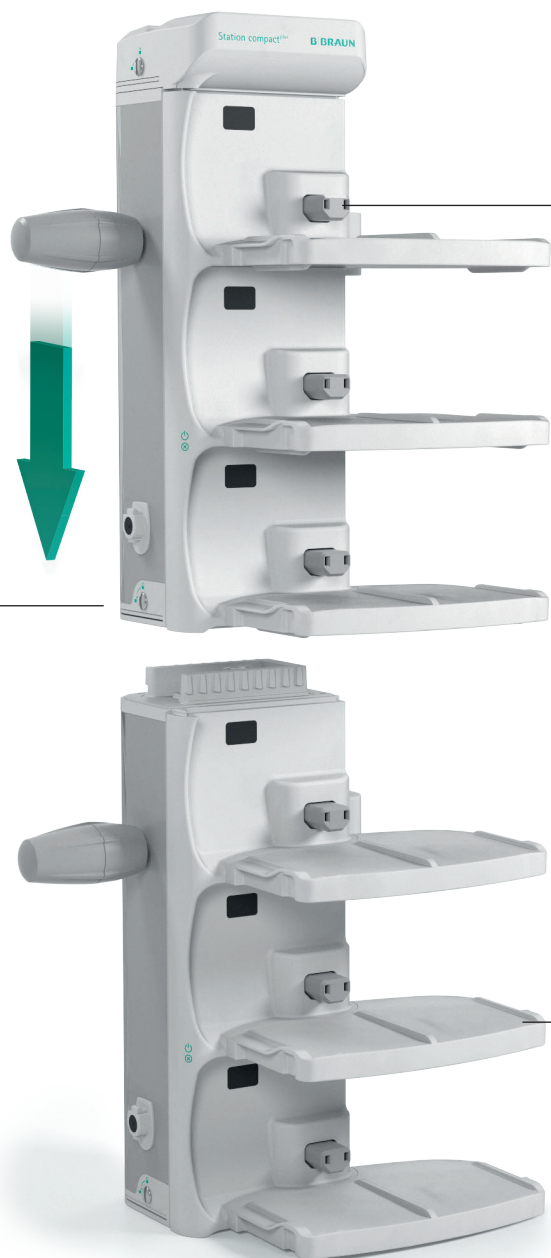Tijdbesparend - meer tijd voor zorg



**Eenvoudig koppelen**  
De stations zijn snel en eenvoudig te koppelen: inpluggen en vergrendelen volstaat.

**Stroomaansluitingen**  
De netvoeding werkt alleen als de pomp is aangesloten: veilig en gemakkelijk te desinfecteren.

**Houder voor infuuspomp**  
Het geleidingsysteem maakt het plaatsen van de pomp eenvoudig.



**18** Flexibele configuraties  
Per patiënt kunnen 18 pompen / 6 stations gestapeld worden.

**Datamodule Compact<sup>plus</sup>**  
Flexibele en geavanceerde integratie in het ziekenhuis-netwerk. Wifiverbinding inbegrepen.



EENVOUDIG PLAATSEN  
VAN POMPEN



INTELLIGENTE  
STROOMAANSLUITING



EENVOUDIG  
KOPPELEN





ETHERNET  
AANSLUITING



# Systeem voor reductie van doseerfouten

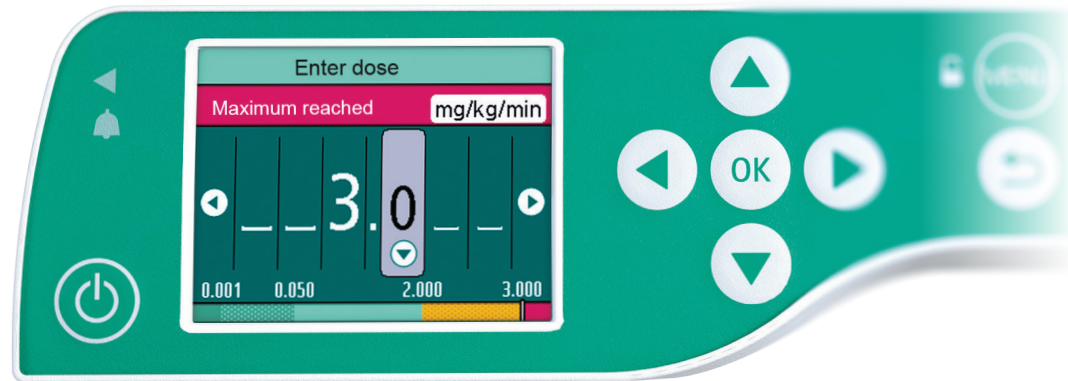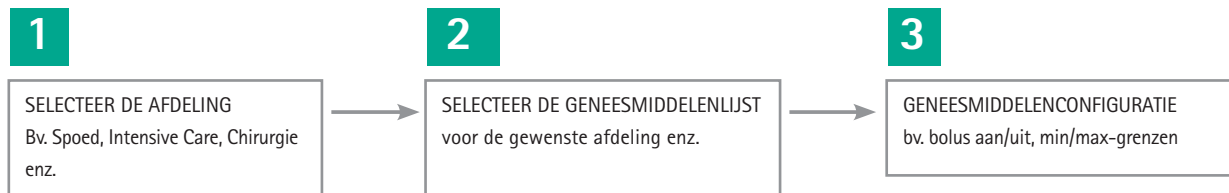Tijd voor zorg




**B. Braun DoseGuard™**  
Systeem voor het reduceren van doseerfouten

- meer dan 3000 geneesmiddelen
- 30 categorieën (bv. Antibiotica)
- specifieke zorgafdelingen




# B. Braun OnlineSuite

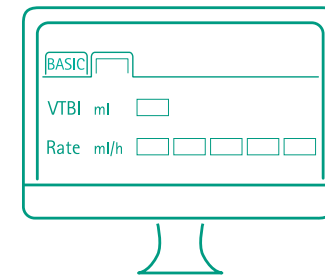Voor innovatieve oplossingen




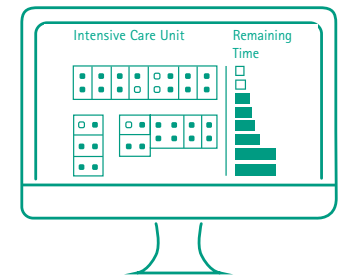**Drug Library Manager**  
Beheer geneesmiddelenbibliotheek.




**OneView**  
Efficiënter werken dankzij een gecentraliseerd overzicht van de therapiegegevens en alarmen.

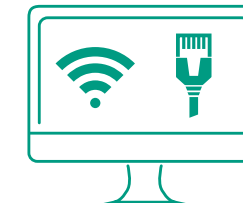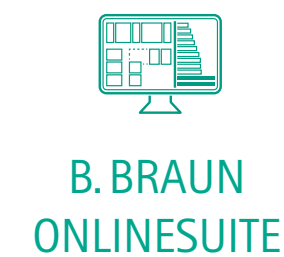**Upload Manager**  
Geneesmiddelenbibliotheek, upgrade software en configuratie van de pompen via het ziekenhuisnetwerk naar de pompen sturen. Hierdoor blijven de pompen steeds up-to-date.


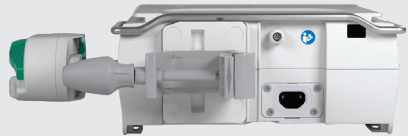


**PDMS**  
Naadloze integratie via wifi of LAN van alle therapiedata naar het elektronische patiëntendossier.







# Technische gegevens


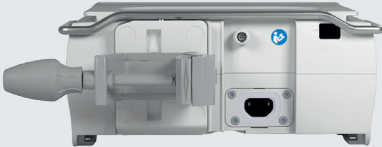
Perfusor® compact <sup>plus</sup>	Beschrijving	
Type	Spuitpomp	 
Afmetingen	290 x 98 x 220 mm (L x H x B)	
Gewicht	2.3 kg	
Vochtbestendigheid	IP34 (waterspatten uit elke richting)	
Display	Kleurendisplay met actieve matrix 2,4" TFT, 240 x 320 pixels, 262k-kleuren, kijkhoek: alle 80°	
Batterij	Opladbare Li-ionbatterij Batterijduur: ca. 10 uur bij 5 ml/uur Opladtijd: ca. 3 uur	
Basissnelheid	0.1-999.9 ml/uur	
Nauwkeurigheid	± 2% in overeenstemming met IEC/EN 60601-2-24	
Bolussnelheid	1 - 1800 ml/uur	
Ondersteunde spuitfabrikanten	B. Braun Original Perfusor®, Omnifix®, BD, Terumo Maten: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml	
Geneesmiddelenbibliotheek	3000 geneesmiddelen inclusief alle parameters in maximaal 30 categorieën	
Artikelnummer	8717030	

## SCHOONMAKEN EN DESINFECTEREN

Groep	
<b>Alcoholen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meliseptol® New Formula</li> <li>Meliseptol® Rapid</li> <li>Meliseptol® HBV Tissues</li> <li>Meliseptol® Foam pure</li> <li>Meliseptol® Wipes sensitive</li> <li>Softa® Cloth CHX 2%</li> </ul>	<b>Quaternaire ammoniumverbindingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hexaquant® forte</li> <li>Hexaquant® plus</li> <li>Hexaquant® plus lemon fresh</li> <li>Hexaquant® S</li> </ul>
<b>Aldehyden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melsept® SF</li> <li>Melsitt®</li> </ul>	<b>Actief chloor</b>
<b>Zuur</b>	<b>Fenolen</b>
	<b>Peroxiden</b>
	<b>Alkylaminen</b>

De hierboven vermelde groepen schoonmaakproducten zijn goedgekeurd voor gebruik. Respecteer de normale desinfectieprocedure volgens de aanbevelingen van de fabrikanten.

Infusomat® compact <sup>plus</sup>	Beschrijving	
Type	Volumetrische infuuspomp	 
Afmetingen	229 x 98 x 220 mm (L x H x B)	
Gewicht	1.9 kg	
Vochtbestendigheid	IP34 (waterspatten uit elke richting)	
Display	Kleurendisplay met actieve matrix 2,4" TFT, 240 x 320 pixels, 262k-kleuren, kijkhoek: alle 80°	
Batterij	Opladbare Li-ionbatterij Batterijduur: ca. 6 uur bij 25 ml/uur Opladtijd: ca. 3 uur	
Basissnelheid	0.1-1200 ml/uur	
Nauwkeurigheid	± 5% over 96 uur	
Bolussnelheid	1 - 1200 ml/uur	
Ondersteunde infuuslijn	Infusomat <sup>plus</sup> lijn	
Geneesmiddelenbibliotheek	3000 geneesmiddelen inclusief alle parameters in maximaal 30 categorieën	
Artikelnummer	8717050	

Infusomat® compact <sup>plus</sup> P	Beschrijving	
Type	Volumetrische infuuspomp	 
Afmetingen	229 x 98 x 220 mm (L x H x B)	
Gewicht	1.9 kg	
Vochtbestendigheid	IP34 (waterspatten uit elke richting)	
Display	Kleurendisplay met actieve matrix 2,4" TFT, 240 x 320 pixels, 262k-kleuren, kijkhoek: alle 80°	
Batterij	Opladbare Li-ionbatterij Batterijduur: ca. 6 uur bij 25 ml/uur Opladtijd: ca. 3 uur	
Basissnelheid	0.1-1200 ml/uur	
Nauwkeurigheid	± 5% over 24 uur	
Bolussnelheid	1 - 1200 ml/uur	
Ondersteunde infuuslijn	Europese pomp-gecertificeerde infuuslijnen	
Geneesmiddelenbibliotheek	3000 geneesmiddelen inclusief alle parameters in maximaal 30 categorieën	
Artikelnummer	8717070	



# Technische gegevens

Compact <sup>plus</sup> Com station	Beschrijving	
Type	Dockingstation voor maximaal 3 infuuspompen	
Afmetingen	305x375x202 mm (L x H x P)	
Gewicht	3.3 kg	
Vochtbestendigheid	IP34 (waterspatten uit elke richting)	
Configuratie	Gereedschapsloze montage. Maximaal 6 compact <sup>plus</sup> stations (max. 18 infuuspompen) kunnen worden gestapeld in één of twee pijlers.	
Interfaces	- Infrarood - Verpleegkundigenalarm	
Accessoires	Bevestiging voor wandrailsystemen en paalsystemen	
Paalklem	Voor verticale montage met geïntegreerde bescherming tegen doordraaien	
Artikelnummer	8717141	

Cover compact <sup>plus</sup>	Beschrijving	
Type	Cover voor compact <sup>plus</sup> Station	
Afmetingen	128x44x124 mm (L x H x P)	
Gewicht	0.25 kg	
Vochtbestendigheid	IP34 (waterspatten uit elke richting)	
Artikelnummer	8717145	

Datamodule compact <sup>plus</sup>	Beschrijving	
Type	Datamodule voor compact <sup>plus</sup> Station	
Afmetingen	243x92x235 mm (L x H x P)	
Gewicht	1.1 kg	
Vochtbestendigheid	IP34 (waterspatten uit elke richting)	
Interfaces	Het is mogelijk om de communicatiemodule als optie te integreren in het compact <sup>plus</sup> station. Dit maakt het mogelijk om gegevens uit te wisselen met maximaal 18 infuuspompen. Interfaces: Ethernet, 2 x USB, wifi, HDMI, Mini DIN 9	
Artikelnummer	8717160	

# Accessoires

Product	Beschrijving	Artikelnummer
Stroomkabel	Universele stroomkabel 230V, 250 cm	8717110
Universele klem voor infuusstation compact <sup>plus</sup>	Klem voor bevestiging aan wandrails en IV-palen	8717142
Aansluitkabel 12V compact <sup>plus</sup>	Aansluitkabel voor voedingskabel 12V	8718020
Kabel voor verpleegkundigenalarm compact <sup>plus</sup>	Kabel voor verpleegkundigenalarm voor Pomp compact <sup>plus</sup>	8718030
Kabel voor verpleegkundigenalarm	Kabel voor verpleegkundigenalarm voor Station compact <sup>plus</sup>	8718031
Verbindingskabel 60 cm	Aansluitkabel voor het verbinden van twee modules, 60 cm	8718060
Verbindingskabel 120 cm	Aansluitkabel voor het verbinden van twee modules, 120 cm	8718061
Verbindingskabel 1000 cm	Aansluitkabel voor het verbinden van twee modules, 1000 cm	8718062



Het procesconcept van B. Braun is bedoeld om werkstromen te optimaliseren en de transparantie te verbeteren. We hebben vijf processtappen in de therapie geïdentificeerd en we bieden producten en diensten aan die afgestemd zijn op iedere stap van dit proces.

Onze producten komen allemaal van dezelfde fabrikant en zijn daarom perfect op elkaar afgestemd. Zo creëren we geavanceerde systeemoplossingen voor iedere fase van de therapie.



PRESCRIPTION

PATIENT ACCESS

PREPARATION

APPLICATION

DISCHARGE  
MANAGEMENT

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 672411 | [customercare.nl@bbraun.com](mailto:customercare.nl@bbraun.com) | [www.bbraun.nl](http://www.bbraun.nl)

B. Braun Medical N.V. | +32 (0)2 712 8650 | [customercare.be@bbraun.com](mailto:customercare.be@bbraun.com) | [www.bbraun.be](http://www.bbraun.be)

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.

V02/2021